




Slow-Wave UG (haftungsbeschränkt)

Balzacstraße 7 • 04105 Leipzig

Mail: info@slow-wave.de • Tel: +49 341 263 531 37

Vertrieb durch:



www.slow-wave.de

8. Gewährleistung

Regelung: Unsere Gewährleistungszeit für eine Sachmangelhaftung beträgt 24 Monate - für ein Gerät in privater Nutzung; 12 Monate - für ein gewerblich eingesetztes Gerät, jeweils ab Lieferdatum.

Verschleißteile, Verbrauchsmaterialien, Gehäuseoberflächen, Ketten und Ösen sind allgemein von den Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.

Ein Gewährleistungsanspruch erlischt:

- bei Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung und bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes „SlowWave“, wie starke mechanische Belastungen, Stöße, Wasseranwendung, Sturzbelastungen;
- bei Eingriffen in die Technik des Geräts oder Verwendung von Verschleiß-, Verbrauchs- oder Ersatzteilen, die keine Originallieferanteile sind;
- wenn Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen am Gerät durch nicht autorisierte Personen vorgenommen werden;
- wenn bei der Anwendung des Gerätes diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wird;
- wenn sichernde Verbindungselemente gelöst, entfernt oder getrennt wurden.

Wichtige Hinweise

Sie sollten bei Nutzung des Magnet- und Frequenzgenerators genügend Wasser (etwa 2 Liter/ohne Kohlensäure) trinken. Bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr können Kopfschmerzen auftreten und die möglichen positiven Wirkungen des Wellnessgerätes werden reduziert. Es kann zu Beginn der Nutzung kurzfristig zu Reaktionen wie: leichtes Herzklopfen, Durchblutungsförderung im Gesicht oder auch leichte Unruhe kommen. Das ist nicht als Nebenwirkung, sondern als Zeichen beginnender Regulationsprozesse zu verstehen und sollte im weiteren Verlauf abnehmen. Lesen Sie bitte dazu unsere Broschüre, wo wir ausführlicher auf Wirkungen aber auch Ausschlusskriterien Bezug nehmen.

Technische Angaben:

Batterie/Akku:

- eingebauter Li-Po Akku, 3,7V, 200mAh,
- Ladung per Wireless Charging, Qi (WPC v1.2 Qi Industry Standard) kompatibel
- Ladestrom ca. 40mA --> ca. 5h Ladezeit bei leerem Akku
- Lebensdauer der Batterie ca. 500 Vollade-Zyklen

Anzeige (rote LED) bei niedrigem Batteriestand:

- roter Flash zwischen den Farbsequenzen,
- mit zunehmender Entladung erst 1 Blitz, dann 2, usw. bis zu 5 Blitzen, danach geht das Gerät in den Power-Down-Zustand

Magnetfeld-Eigenschaften:

- 3 Intensitäten: je ca. 800, 1600, 2000µT, mit jedem Frequenzwechsel zufällig gewählt
- Frequenzen: 14 Frequenzen, 8 Hz – 528 Hz durch die zufällig gewechselt wird
Lichtdurchlauf durch verschiedene Farbspektren einmal pro Minute – Dauer 11 s

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Wellnessgerät „SlowWave“.

**WICHTIGES
VOR DER
ERSTEN
BENUTZUNG!**

MAGNET- UND FREQUENZGENERATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG
MIT DEN TECHNISCHEN ANGABEN



Bedienungsanleitung Magnetfeld- und Frequenzgerät „SlowWave“

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Lieferumfang
3. Gerätebeschreibung
4. Bedienung und Handhabung
5. Hinweise zur Wasserresistenz
6. Reinigung
7. Wissenschaftliche Akzeptanz
8. Gewährleistung

1. Einführung

Das Magnetfeld- und Frequenzgerät „SlowWave“ ist ein Wellnessprodukt, welches Magnetfeldimpulse, Frequenzen sowie Licht generiert. Die Applikationen sind Prozessen in der Natur ähnlich. Für den Umgang mit dem Gerät lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung. Die Anwendung des Gerätes kann eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen, zu der ausreichend Schlaf, körperliche Bewegung im Freien und eine gesunde Ernährung gehören. Das Produkt kann die Behandlung durch den zuständigen Arzt oder Therapeuten nicht ersetzen. Zur besseren Kenntnis der Einflüsse auf den menschlichen Organismus und der Wirkung von pulsierender Magnetfeldtechnologie, lesen Sie hierzu bitte auch unsere mitgelieferte Beschreibung.

*Vielen Dank,
dass Sie sich für unser
Produkt
entschieden haben.*

2. Lieferumfang

- Magnetfeld- und Frequenzgerät „SlowWave“ aus Holz,
- Induktionsladegerät mit Kabel und Ladestecker,
- Trageband und Verpackung,
- Bedienungsanleitung


3. Gerätebeschreibung

Das Wellnessgerät „Slow~Wave“ ist ein miniaturisiertes pulsierendes Magnetfeld- und Frequenzgerät. Es hat eine akkubetriebene Elektronik, welche Magnetfelder, Frequenzen sowie Licht verschiedener Farbspektren abgibt.

Das Gehäuse ist aus Holz (Pflaume, Kirsche oder Birke) gefertigt.

4. Bedienung und Handhabung

Das Gerät „SlowWave“ wird vorgeladen geliefert. Das Gerät sollte vor dem ersten Tragen vollständig aufgeladen werden (Ladezeit ca. 3-4 Stunden). Dazu schließen Sie die Ladeschale mit dem mitgelieferten Kabel und Ladestecker an.

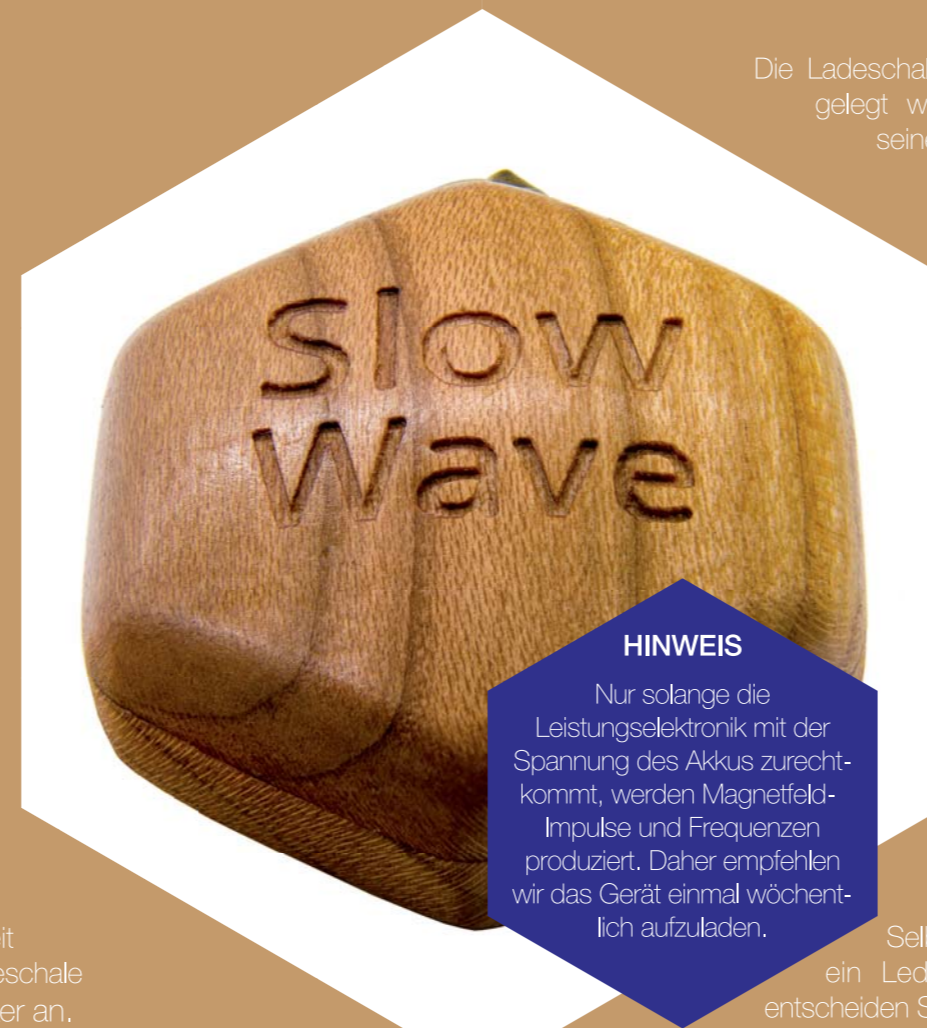

Die Ladeschale muss mit der beschrifteten Seite nach unten gelegt werden. Dann legen Sie das „Slow~Wave“ mit seinem Schriftzug auf die Ladeschale. Nach kurzer Zeit leuchtet dann ein für Sie sichtbares blaues Licht. Nach ca. 3-4 Stunden, bzw. bei Abschalten des blauen Lichts ist der Akku geladen und Sie können das Gerät nun tragen (Laufzeit ca. 4-6 Tage).

Das Licht am Gerät läuft 1 x pro Minute ca. 10 s mit verschiedenen Farben durch. Blinkt die Anzeige schnell mehrfach rot (1x, 2x und folgend 3x) dann wird auf den baldig notwendigen Ladeprozess hingewiesen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht geladen wurde, ist kein Licht mehr sichtbar. Es wird nach kurzer Zeit aktiviert, wenn das Gerät wieder geladen wird.

Das Gerät wird mit dem Lichtauslass etwa mittig auf dem Brustbein (vorderer Brustkorb) getragen. Die Länge stellen Sie sich dabei individuell ein.

Selbstverständlich können Sie das Band auch durch ein Lederband oder auch eine Kette ersetzen. Das entscheiden Sie nach Ihren Vorstellungen.

HINWEIS

Nur solange die Leistungselektronik mit der Spannung des Akkus zurechtkommt, werden Magnetfeldimpulse und Frequenzen produziert. Daher empfehlen wir das Gerät einmal wöchentlich aufzuladen.

5. Hinweis zur Wasserresistenz des Gerätes

Das Gehäuse des „SlowWave“ ist nicht wasserdicht. Daher darf das Gerät nicht beim Duschen getragen, gebadet oder beim Wassersport betrieben werden. Beim Sport kann es getragen werden. Durch den dabei auftretenden Schweiß kann sich das Holz etwas in der Farbe verändern, was bei Naturholz normal ist.

6. Reinigung

Das Gerätegehäuse ist äußerlich mit einem weichen, sauberen Tuch zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine "scharfen" chemischen Haushaltsreiniger.

7. Wissenschaftliche Akzeptanz

Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über das Gerät „SlowWave“ zu machen. Bei den getroffenen Aussagen und Informationen zu den Wirkungen des Gerätes beziehen wir uns auf wissenschaftliche Untersuchungen sowie Erfahrungsberichte von Anwendern.

Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und –versprechen sowie von Aussagen der medizinischen Wirksamkeit im Sinne des Heilmittelgesetz (HWG) und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).